

# User manual

MANUEL D'UTILISATION  
GEBRUIKSAANWIJZING  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
NÁVOD K OBSLUZE

## Mia



## Asiento elevador de inodoro Mia

Le agradecemos su confianza en los productos Vermeiren. Le ofrecemos este manual para ayudarle en la utilización de su asiento elevador de inodoro. Léalo detenidamente. Si todavía tiene alguna duda después de leer este manual, contacte con su distribuidor especializado, estará encantado de ayudarle. En nuestro sitio web [www.vermeiren.com/](http://www.vermeiren.com/) siempre encontrará la versión más reciente de la información en este manual. Consulte este sitio web de manera regular para estar al tanto de posibles actualizaciones. Las personas con discapacidad visual pueden descargarse la versión electrónica del manual y utilizar un software de síntesis de voz para poder oír su contenido.

### 1 Entrega

Desembalar el producto y verificar que la entrega está completa. Las siguientes piezas vienen incluidas en la entrega:

- Asiento elevador de WC con tapa
- 2 ajustes de ancho
- Opcional: cojín del asiento de inodoro.
- manual

Compruebe que el producto no haya sufrido daños durante el transporte. Si detectase algún defecto en el producto, contacte con el transportista.

### 2 Montaje y uso del asiento de inodoro



PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones

- Antes de cada uso, asegúrese de que el asiento del inodoro esté bien montado en el inodoro.
- Para asegurarse de que el asiento del inodoro permanezca correctamente ajustado, afloje y vuelva a ajustar los ajustes de ancho una vez por semana.
- No exceda el peso máximo del usuario

Indicaciones y contraindicaciones: Nuestro asiento elevador ha sido diseñado para aumentar la altura de un inodoro hasta un nivel más cómodo, lo que facilita su uso, por ejemplo en caso de: disfunción de las extremidades inferiores debido a una movilidad limitada o nula de las articulaciones, fuerza muscular reducida en las extremidades inferiores, daños en la


columna lumbar, daños en el sistema nervioso,... El objetivo de este producto es permitir un uso independiente o más independiente del inodoro. Si se utiliza de forma adecuada, no se conocen contraindicaciones.

Mia está disponible en 2 altos de asiento: 10 cm o 15 cm.

El peso máximo del usuario del asiento elevador de WC es de 225 kg.

Para instalar Mia:

1. Levante la tapa del inodoro y el asiento. Si es necesario, retire la tapa y el asiento.
2. Coloque los ajustes de ancho (1) en su lugar en el asiento elevador de WC. Gire el perno de Estrella en sentido horario para reducir el ancho de asiento.
3. Coloque el asiento elevador de WC sobre el borde del WC [A] con la pestaña delantera (2) hacia afuera.
4. Empuje el asiento del inodoro elevado hacia atrás [B] tanto como sea posible.
5. Apriete los ajustadores de ancho (1) con la mano.

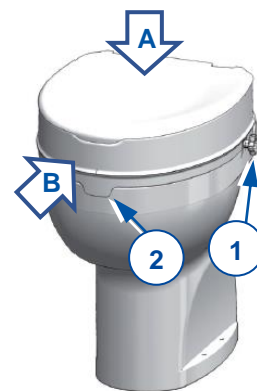

Para colocar el cojín opcional, retire la tapa del asiento elevador.

Baje lentamente hasta el asiento doblando los codos, las caderas y las rodillas siempre que sea posible. No se aferre al asiento elevado para apoyarse mientras se baja o se pone de pie.

### 3 Mantenimiento

Su asiento de inodoro elevado está construido con componentes de plástico. Mia puede limpiarse y desinfectarse con productos domésticos normales. No utilice sustancias agresivas que puedan dañar los colores.

#### 3.1 Vida útil prevista

Mia, está diseñada para un promedio de vida útil de 5 años.

## 4 Datos técnicos

<b>Marca</b>	<b>Vermeiren</b>
<b>Tipo</b>	<b>Asiento de inodoro elevado</b>
<b>Modelo</b>	<b>Mia</b>

<b>Descripción</b>	<b>Dimensiones</b>
Peso máximo	225 kg
Alturas de asiento disponibles	100 mm 150 mm
Ancho	365 mm
Largo	405 mm
Temperatura de almacenamiento	+5°C - +41°C

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos. Tolerancia dimensional  $\pm 15$  mm / 1,5 kg / 1,5°.

**ES**



Vermeiren GROUP  
Vermeirenplein 1 / 15  
2920 Kalmthout  
BE

sitio web: [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)

### **Instrucciones destinadas a los distri-buidores especializados**

El presente manual de instrucciones es parte integrante del producto y se debe adjuntar a todas las producto que se vendan.

Versión: B, 2022-07

Basic UDI: 5415174 120903Mia GW

**Todos los derechos reservados, incluidos los de la traducción.**